

# Рабочие Стулья

Стулья, созданные для эффективной работы



The logo for 'a dec' is located in the bottom right corner. It consists of the lowercase letters 'a' and 'dec' in a blue, sans-serif font. A stylized blue caduceus symbol is positioned between the 'a' and 'dec'.

# Рабочие стулья A-dec 500

## Исключительный комфорт для команды стоматологов

Имея возможность работать в комфорте, вы обеспечиваете своим пациентам наилучший уровень ухода. Теперь появился уникальный эргономичный стул, который предоставляет вам такую возможность: A-dec 500.

Инновационный стул A-dec 500 разработан на основе многолетних исследований с целью обеспечить вам максимальный комфорт, а следовательно, наиболее эффективную работу.



# Стулья, поддерживающие правильную рабочую позу

Стулья A-dec 500 спроектированы таким образом, чтобы повторять очертания вашего тела и адаптироваться к вашим движениям. Приведем в пример сиденье с динамической поддержкой. Все — от подвесной рамы до гибких, принимающих форму тела материалов — служит единой цели: обеспечивать комфорт и поддержку. Легко доступные ручки регулировок дополняют возможность индивидуализации, позволяя вам регулировать параметры стула для поддержания эргономически правильной позы в течение всего дня.




Стул для врача A-dec 521



Стул для ассистента A-dec 522

## Здоровая осанка

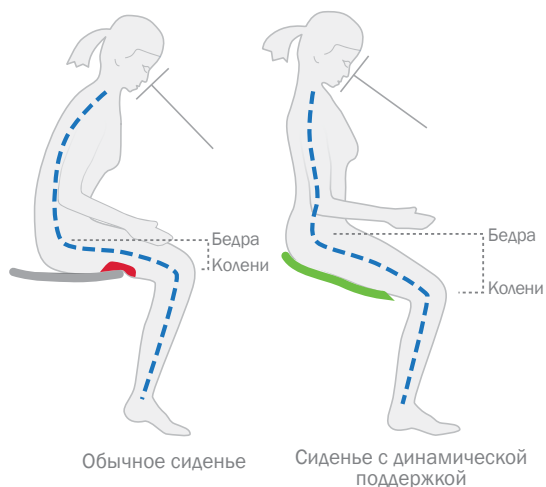

Наше решение для удовлетворения ваших потребностей в эргономике основывается на изменении вашей манеры сидения, чтобы избежать искривления позвоночника. Такая здоровая поза называется «позой атлета». Когда вы сидите так, что ваши бедра находятся выше колен, а спинка наклонена вперед, ваш позвоночник сохраняет здоровое S-образное положение. Динамическое сиденье позволяет вам наслаждаться комфортом и улучшенной функциональностью.

## Четыре режима регулировки



Правильная поза снижает нагрузку на суставы и позвоночник и обеспечивает лучшую циркуляцию крови в ступнях и конечностях. Стулья A-dec 500 оснащены легко доступными пронумерованными ручками регулировки, обеспечивающими плавную индивидуальную регулировку в течение дня, что особенно важно, когда одним стулом пользуется несколько человек.

## Система динамической поддержки



Три гибких слоя сиденья подстраиваются под каждое ваше движение.

- 1. Подушка из амортизирующего поролона** (верхний слой) составляет финальный штрих комфорта.
- 2. Каркас с переменной гибкостью Comfort-flex** (средний слой) состоит из четырех функциональных зон, адаптирующихся к вашим движениям.
- 3. Гибкая рама** (основание) поддерживает вас при больших амплитудах движения.

# Стулья A-dec 500

## Динамическая поддержка

Наши многофункциональные стулья A-dec 500 оснащены системой динамической поддержки с уникальными функциональными зонами, которые подстраиваются под форму тела. Эти функциональные зоны работают одновременно для обеспечения наилучшей поддержки в процессе работы, когда вы двигаетесь или наклоняетесь. Дополнительные особенности, например контурная спинка, обеспечивают непревзойденный комфорт для позвоночника. Благодаря эргономичным стульям A-dec вы можете сконцентрироваться на том, что наиболее важно, — на ваших пациентах.

### ОСОБЕННОСТИ СТУЛА

#### Сиденье с изменяемым углом наклона

Распределяет вес в нижней части тела, обеспечивая правильную циркуляцию крови.

#### Контурная спинка

Фиксирует позвоночник, обеспечивая приток крови. Контурная спинка установлена по умолчанию на стуле врача A-dec 521 и может быть дополнительно установлена на стуле ассистента A-dec 522.

#### Обивка

Минимальное количество швов упрощает процедуру очистки.

#### Стандартная кольцевая подставка для ног (на стуле ассистента A-dec 522)

Помогает специалисту сохранять правильную позу.




#### Бесшумные колеса

обеспечивает плавное и бесшумное движение как по коврам, так и по твердому покрытию пола.



#### Ручки регулировки

Пронумерованные ручки регулировки расположены в удобном месте, обеспечивая быструю регулировку и легкую очистку.

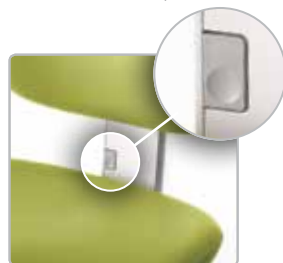

#### Контроль высоты спинки

Клавиша регулировки высоты имеет удобное расположение и обеспечивает быструю регулировку одной рукой.

Стул врача A-dec 521

Стул ассистента A-dec 522



Стул ассистента A-dec 522 с дополнительной подставкой для ног и спинкой



### Дополнительная подставка для ног

Заменяет кольцевую подставку для ног для лучшего распределения веса в нижней части тела, чтобы вы приняли «позу атлета».


Стул врача A-dec 521 с дополнительными поворотно-откидными подлокотниками



### Стул врача A-dec 521 Выберите правильную высоту

Чтобы подобрать правильную высоту стула, измерьте длину тела от бедер до ступней.

Больше 86,36 см — выбирайте цилиндр с большей высотой.  
Меньше 86,36 см — выбирайте короткий цилиндр.

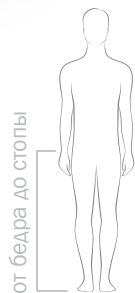

от бедра до стопы

## Стулья A-dec 500 Дополнительное оборудование и принадлежности

### Дополнительные поворотно-откидные подлокотники

Три варианта регулировки — ширина, высота и угол поворота — обеспечивают лучшую поддержку и мобильность.

- Пусть ваши плечи отдыхают, пока вы выполняете процедуры в ротовой полости пациента.
- Вы можете легко отодвинуть подлокотники, если они не нужны.
- Высоту подлокотников также можно регулировать.



	Стул врача A-dec 521	Стул ассистента A-dec 522
Система динамического сиденья	•	•
Контурная спинка	•	Дополнительно
Регулировка угла наклона сиденья	•	Только со спинкой
Поворотно-откидные подлокотники	Дополнительно	
Регулируемая по высоте кольцевая подставка для ног		•
Подставка для ног		Дополнительно

# Стулья A-dec 400

## Легендарная долговечность

Ваш стул будет служить вам долго и должен быть комфортным. Многие годы наши стулья помогают стоматологам поддерживать здоровую осанку. Такие особенности, как спинка анатомической формы, регулируемая опора для корпуса, закругленная кромка сиденья и эргономичный угол наклона, снижают нагрузку на позвоночные диски и уменьшают мышечную боль.

Выберите прошитую или бесшовную обивку, представленную в широкой палитре цветов, которая, несомненно, дополнит интерьер вашего кабинета. Остановите свой выбор на стульях A-dec — мы всегда готовы поддержать вас.

	A-dec 421 Стул врача	A-dec 422 Стул ассистента
Контурная спинка	•	
Контурное сиденье	•	•
Эргономичный угол наклона	•	
Регулируемая опора для туловища		•
Простые в использовании рычаги-регуляторы	•	•
Регулируемая по высоте кольцевая подставка для ног		•

**Примечание:** Стулья A-dec 400 не оснащены новой системой динамической поддержки, которая является стандартом для стульев A-dec 500.

Стул ассистента  
A-dec 422

Стул врача  
A-dec 421



## Стул врача A-dec 421 Выберите правильную высоту

Чтобы подобрать правильную высоту стула, измерьте длину тела от бедер до ступней.

Больше 81,28 см — выбирайте цилиндр с большей высотой.  
Меньше 81,28 см — выбирайте короткий цилиндр.



# Варианты обивки и цветов

## Все дело в цвете

Создайте кабинет, по-настоящему отражающий вашу личность, используя различные цвета. Выберите из широкого разнообразия цветов бесшовной или прошитой обивки для стульев A-dec 421 и A-dec 422. Для стульев A-dec 521 и A-dec 522 доступны варианты только с прошитой обивкой. Почерпните вдохновение на сайте [a-dec.com/InspireMe](http://a-dec.com/InspireMe).

## Бесшовная обивка (доступно для стульев A-dec 400)



Закажите образцы на веб-сайте [a-dec.com/InspireMe](http://a-dec.com/InspireMe)



## Прошитая обивка (доступно для стульев A-dec 500 и A-dec 400)



\* Цвета прошитой обивки, которые дополняют цвета бесшовной обивки.

Фактические цвета могут отличаться. Для получения самой последней информации о продукции и образцов обивки обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.



**Головной офис компании A-dec**

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132 США  
Тел.: 1.800.547.1883 на территории США/Канады  
Тел.: +1.503.538.7478 за пределами США/Канады  
Факс: +1.503.538.0276  
a-dec.com

**A-dec Australia**

Тел.: 1.800.225.010 для Австралии  
Тел.: +61.(0)2.8332.4000 для других стран, кроме Австралии

**A-dec China**

Тел.: 400.600.5434 для Китая  
Тел.: +86.571.89026088 для других стран, кроме Китая

**A-dec United Kingdom**

Тел.: 0800.233285 для Великобритании  
Тел.: +44.(0).24.7635.0901 для других стран, кроме Великобритании



Для получения дополнительной информации об эргономичных стульях A-dec или информации по эргономике посетите веб-сайт [a-dec.com/500stools](http://a-dec.com/500stools).

A-dec и логотип A-dec являются торговыми марками, зарегистрированными в Бюро США по патентам и торговым маркам. Все остальные изделия или услуги, упоминаемые в данном документе, отмечены торговыми марками, знаками обслуживания или специальными названиями продукции и являются собственностью компаний, реализующих данные изделия.

Представленные цвета и изделия могут отличаться в зависимости от фактических материалов и подлежат изменению без уведомления. Для получения образцов расцветки и самой последней информации о продукции обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.